




HOIATUS: Hoida lastele kättesaamatus kohtas. Pakk sisaldab lanceti osi, mis ei ole mõeldud alla nelja-aastastele lastele kasutada. See ei ole mõeldud kasutada raskete haiguste, näiteks diabeedi, ravimite võtmiseks. See ei ole mõeldud kasutada raskete haiguste, näiteks diabeedi, ravimite võtmiseks. See ei ole mõeldud kasutada raskete haiguste, näiteks diabeedi, ravimite võtmiseks.

90011926

Rev. 12/23

Sihetstarve. Lancett Microlet® on ühekordselt kasutatav steriilne seade, mis on mõeldud täiskasvanul või lapsel kapillaarse vereproovi võtmiseks, et jälgida tema veresuhkru taset. Lancett pole mõeldud kasutamiseks vastsündinutel.
• Paskirtsit: „Microlet®“ lancetas yra vienkartinė sterili priemonė, skirta kapiliarinio kraujo mėginiui paimti iš suaugusiojo arba vaiko siekiant stebėti gliukozės kiekį. Lancetas nėra skirtas naudoti naujagimiams. **• Paredzētais lietojums:** Microlet® lancete ir vienreiz lietojama sterila ierice, kas paredzēta kapilāro asiņu paraugu ņemšanai no pieaugušajiem un bērniem, lai kontrolētu glikozes līmeni asinīs. Lanceti nav paredzēts izmantot jaundzimušajiem.

Juhend. / Instrukcija: / Norādījumi:
 Sīrmeotsast analiūsīmīse teabe ja tāiendava ohutus- ning kasutusinfo leiate oma lantsetiseadmega kaasas olūd juhendist. • norēdami atlikti mėginio iš piršto galo tyrimą ir gauti papildomos informacijos apie saugumą bei efektyvumą, žr. kartu su pradūrimo prietaisu pateiktą instrukciją. • Lai ņemtu asins paraugu no pirksta gala un iegūtu papildu informāciju par drošumu un veikspēju, skatiet norādījumus, kas iekļauti lancetes ierices komplektā.

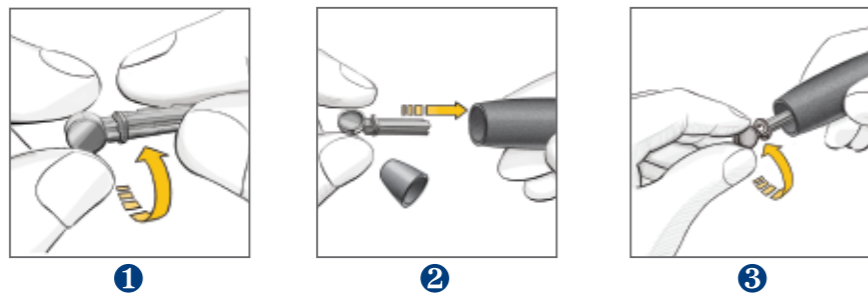

Microlet
 Värvilised lantsetid • Ivainiaspalviai lancetai • Krāsainas lancetes

REF 90010187

STERILE


Lantsett jääb steriilseks seni, kuni kaitsekork eemaldatakse. Ärge kasutage, kui see on kahjustatud seanud või soovimatult avatud. Kõrvaldada alati meditsiinilise jäätmena.
 Lancetas išlieka sterilus, kol nenuimtas apsauginis dangtelis. Nenaudokite, jei jis buvo pažeistas arba netyčia atidarytas. Visada išmeskite kaip medicinišes atliekas.
 Lancete ir sterila, kamēr aizsargvāciņš nav noņemts. Nelietot, ja lancete ir bojāta vai netīšām atverta. Vienmēr atbrīvojieties no tā kā medicīniskajiem atkritumiem.

Microlet
 Värvilised lantsetid • Ivainiaspalviai lancetai • Krāsainas lancetes

Lihne testimine
 Paprastas ir neskausmingas tyrimas
 Vienkārša, ērta pārbaude

200 (8x25)
 Silikoonkattega lantsetid
 Silikonu dengti lancetai
 Ar silikonu pārklātas lancetes

ET • Kasutada koos seeria Microlet® lantsetiseadmetega.
IT • Naudoti su „Microlet®“ grupės pradūrimo prietaisais.
LV • Lietojiet kopā ar Microlet® saimes lancetes ierīcēm.

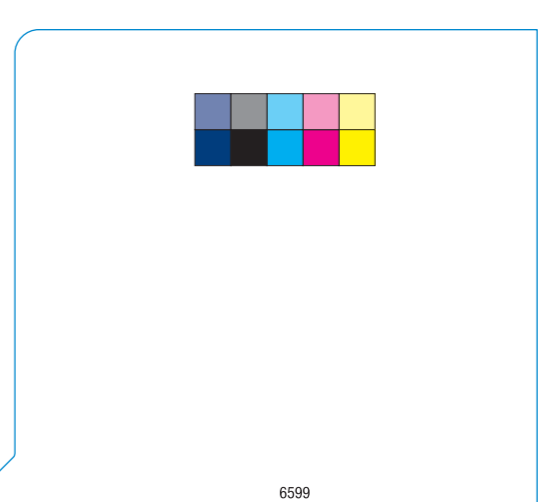

6599

Importija ja levitaja:
 Allium UPI OU
 Vae 16
 Laagri 76401
 Saue vald
 Harjumaa
 Estõnia
 Tel. + 372 650 1901
 Email: info@allium.upi.ee

Importētājs un izplatītājs:
 SIA "Allium UPI"
 Ulbrokas iela 23
 LV-1021 Rīga
 Latvija
 Tel. +371 67 718700
 Email: info@allium.upi.lv

Importuoja ir platina:
 Allium UPI, UAB
 Kintų g.11, 09301 Vilnius
 Lietuva
 Tel. +370 5 269 9217
 El. paštas: info@allium.lt

www.diabetes.ascensia.com
 Toodetud Poolas. • Papaminta Lenkijoje. • Izgatavotas Polijā.
 Kui selle seadme kasutamise ajal või selle kasutamise tagajärjel on toimunud raske vahejuhtum, tuleb sellest teatada tootjale ja/või tema volitatud esindajale ning oma riiklikule ametiasutusele. • Jei naudojant šį prietaisą arba dėl jo naudojimo įvyko rimtas incidentas, praneškite apie jį gamintojui ir (arba) galiojajam atstovui bei atitinkamai nacionalinei institucijai. • Ja šīs ierices lietošanas laikā vai tās lietošanas dēļ ir noticis nopietns incidents, lūdz, ziņojiet par to ražotājam un/vai tā pilnvarotajam pārstāvim un savas valsts iestādei.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
 Peter Merz-Strasse 90
 4002 Basel, Switzerland

Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
 Via Varesina, 162
 20156 Milano, Italy

MD, CE 2797

© 2023 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Kõik õigused kaitstud.
 • Visas teisēs saugomos. • Visas tiesības aizsargātas.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care logo ja Microlet on ettevõtte Ascensia Diabetes Care Holdings AG kaubamärgid ja/või registreeritud kaubamärgid.
 • „Ascensia“, „Ascensia Diabetes Care“ logotipid ja „Microlet“ yra prekės ženklai ir (arba) registruotieji prekės ženklai, priklausantys „Ascensia Diabetes Care Holdings AG“.
 • Ascensia, Ascensia Diabetes Care logotips un Microlet ir uzņēmuma Ascensia Diabetes Care Holdings AG preču zīmes un/vai reģistrētas preču zīmes.

5 016003 659911